

SCHEDE TECNICHE

Leonardo PB PROPRIOCEPTIVE BOARD

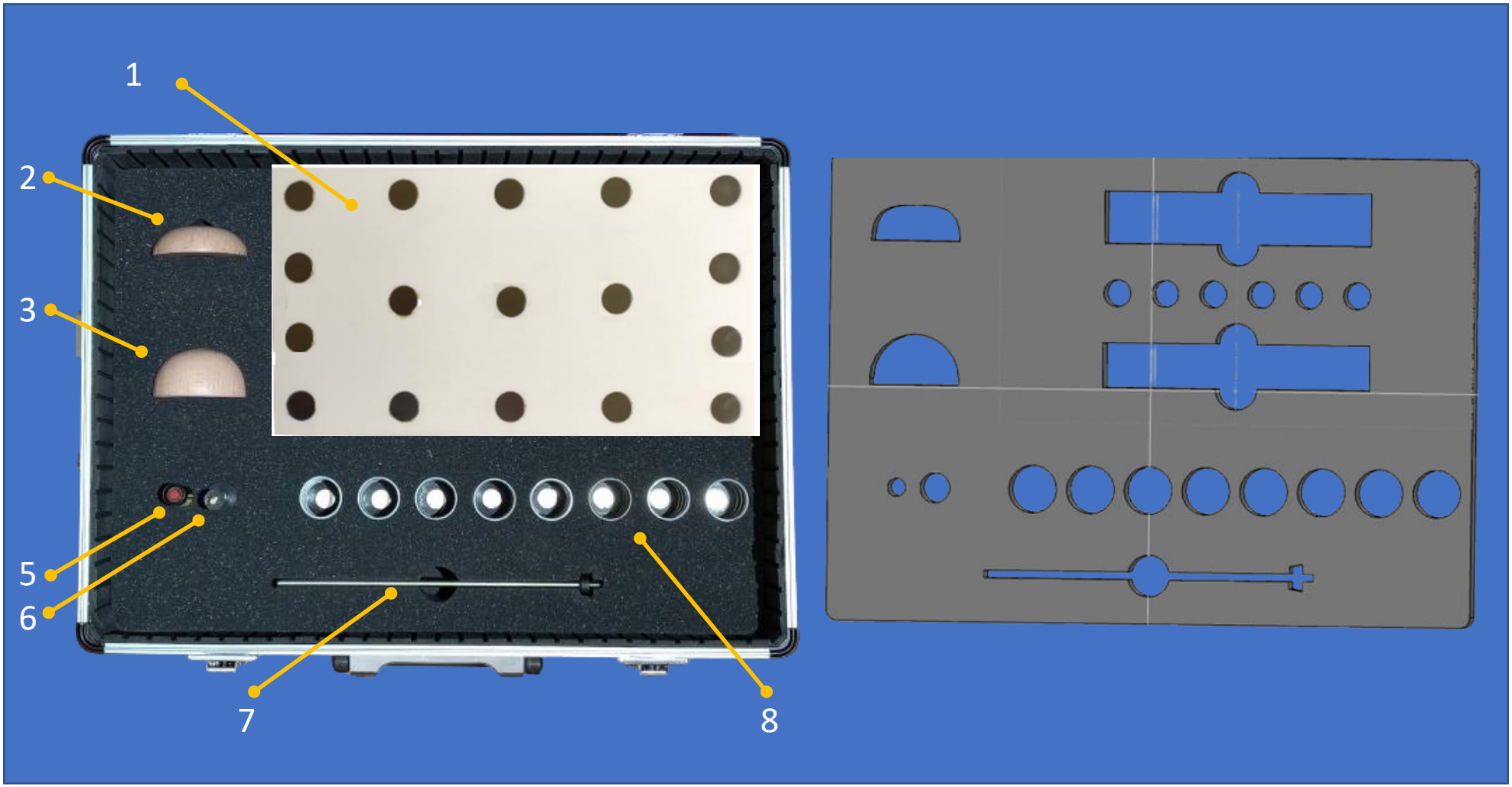

SCHEDE TECNICHE


Leonardo PB PROPRIOCEPTIVE BOARD

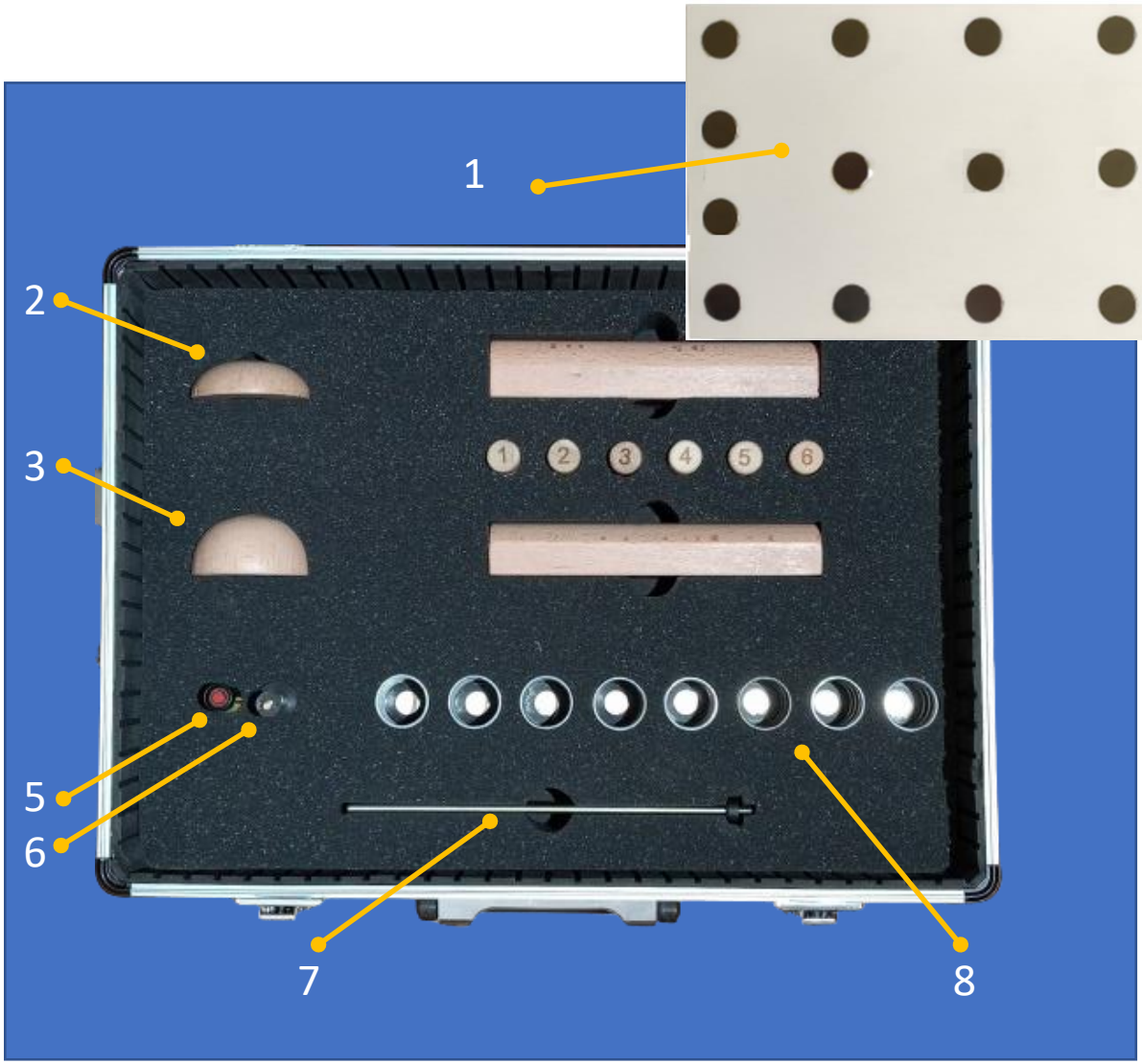

	Componenti
1	TAVOLETTA LATO INFERIORE
2	SEMISFERA BASSA
3	SEMISFERA ALTA
4	ALTEZZE
5	LASER
6	PORTA LASER
7	LANCETTA METALLICA
8	MOLLE
9	CERNIERA BASSA
10	CERNIERA ALTA

SCHEDE TECNICHE


Leonardo PB PROPRIOCEPTIVE BOARD

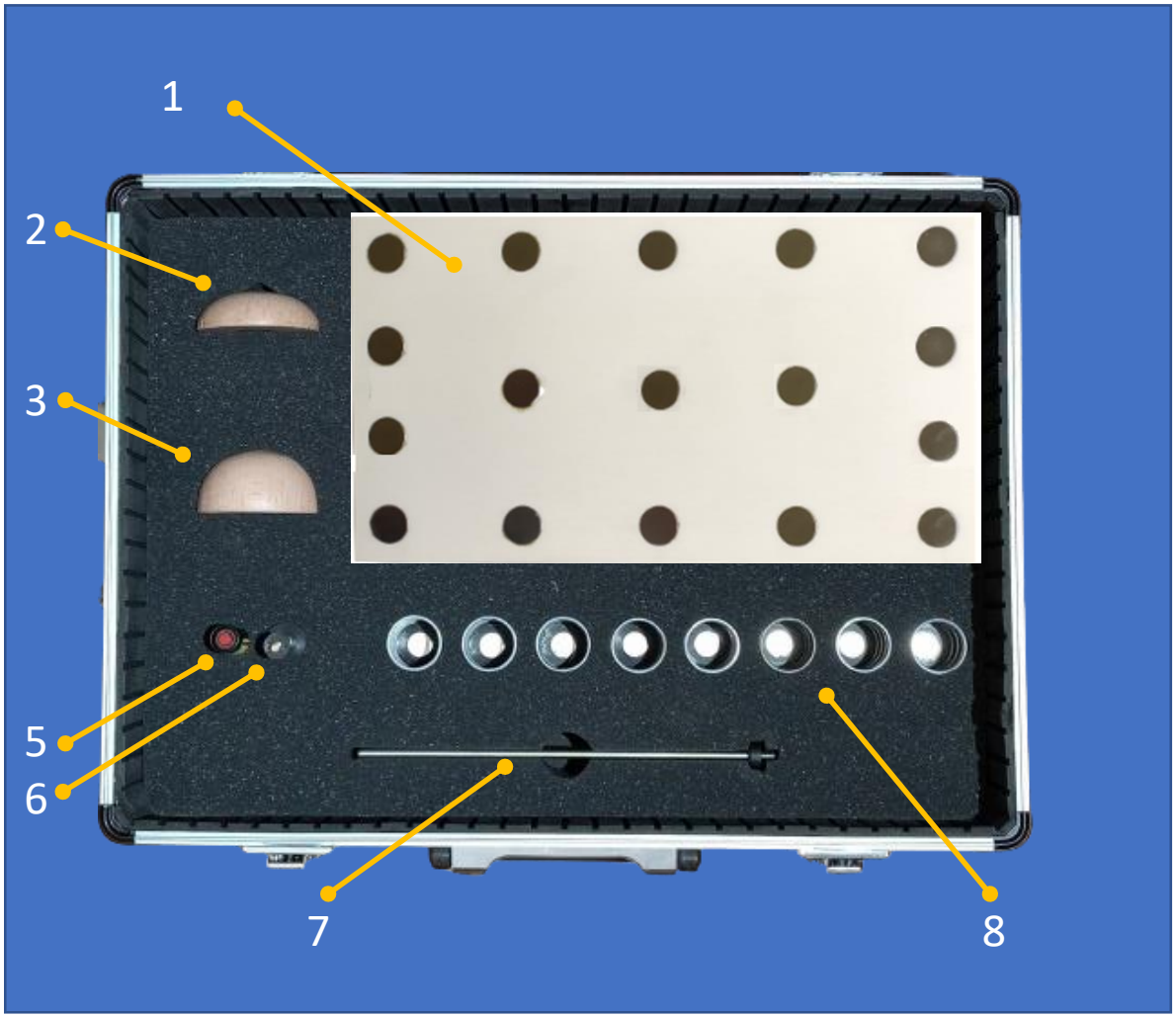

	Componenti
1	TAVOLETTA LATO INFERIORE
2	SEMISFERA BASSA
3	SEMISFERA ALTA
5	LASER
6	PORTA LASER
7	LANCETTA METALLICA
8	MOLLE

SCHEDE TECNICHE

Leonardo PB PROPRIOCEPTIVE BOARD

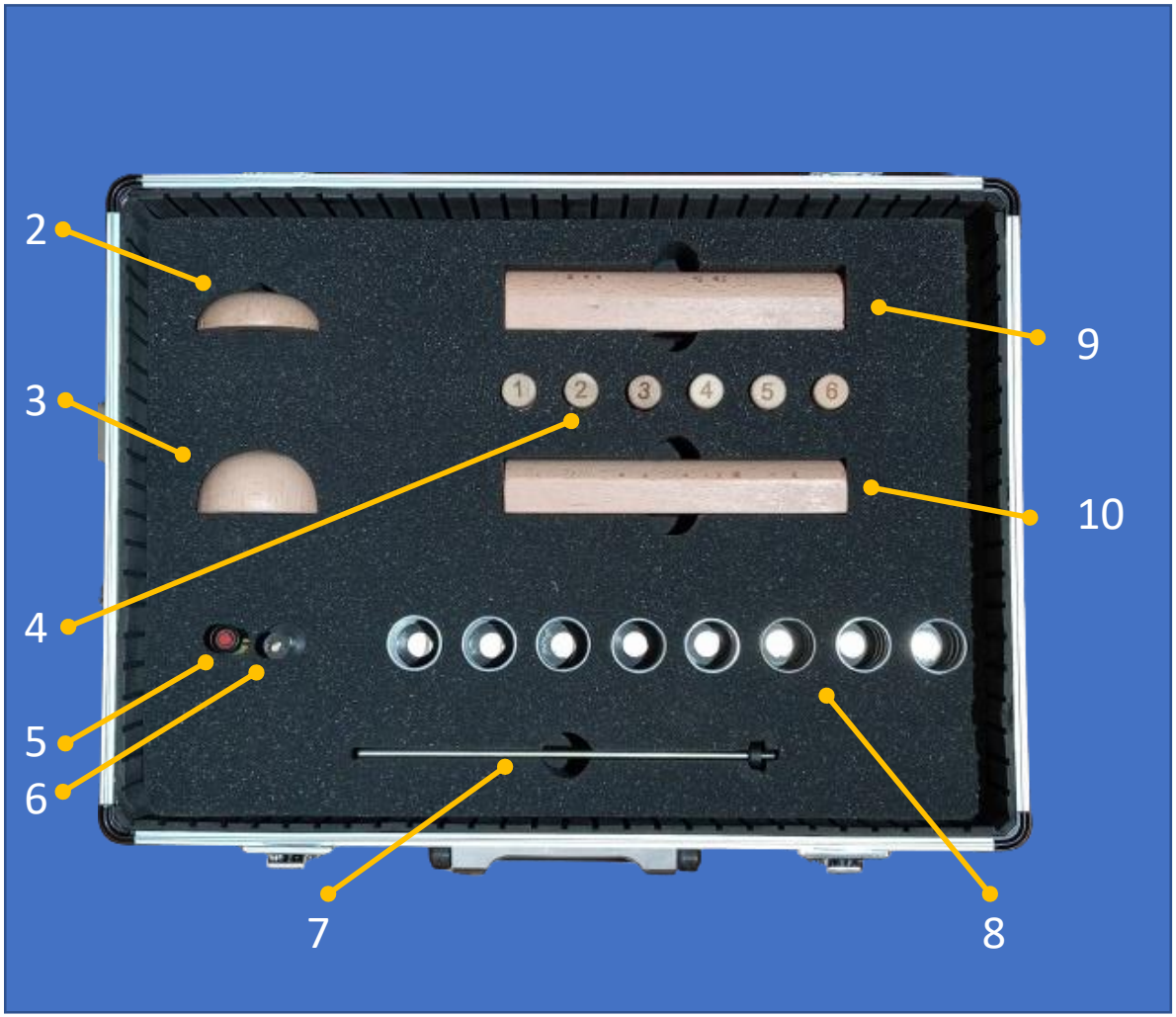

	Componenti
1	TAVOLETTA LATO INFERIORE
2	SEMISFERA BASSA
3	SEMISFERA ALTA
4	ALTEZZE
5	LASER
6	PORTA LASER
7	LANCETTA METALLICA
8	MOLLE
9	CERNIERA BASSA
10	CERNIERA ALTA

Leonardo PB PROPRIOCEPTIVE BOARD


VERIFICARE ESEMPI APPLICATIVI

1 TAVOLETTA Lato Inferiore LI

N°Pezzi:1

- A 17 magneti
- B 1 bussola per porta laser (8)
- C 1 bussola per porta laser (8)


Esempi applicativi: 1 - 2

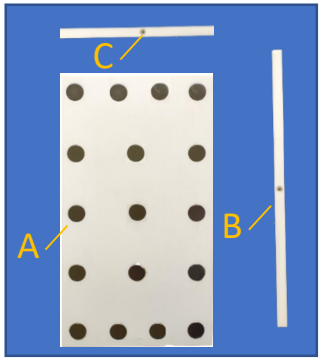

2 SEMISFERA BASSA

N°Pezzi:1


- A 1 magneti per tavoletta LI

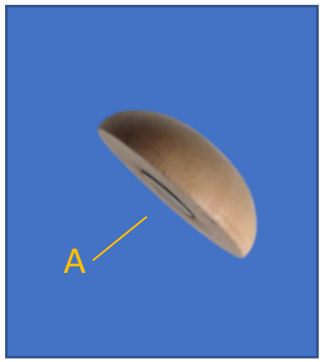

3 SEMISFERA ALTA

N°Pezzi:1


- A 1 magnete per tavoletta LI

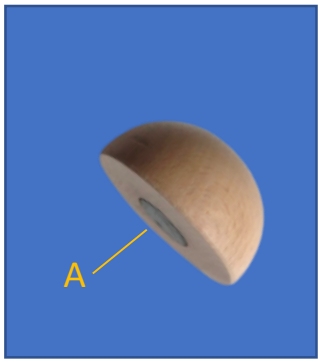

4 ALTEZZE

N°Pezzi: 6

6 cilindri di differenti altezze numerate

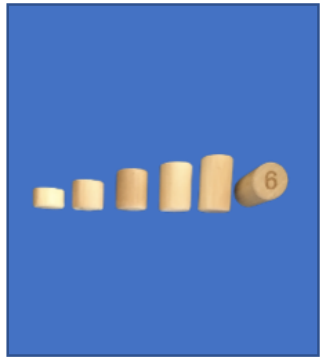

5 LASER

N°Pezzi:1

- A Interruttore

Esempi applicativi: 1




6 PORTA LASER

N°Pezzi:1

- A spazio per inserimento del laser (9)
- B guaina in gomma per stabilizzare il laser (29)
- C terminale filettato da inserire nelle bussole


Esempi applicativi: 1

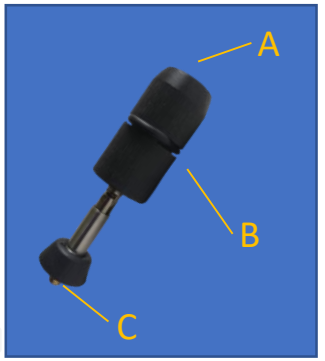

7 LANCETTA METALLICA

N°Pezzi:1

A terminale filettato da inserire nelle cerniere (4,5)

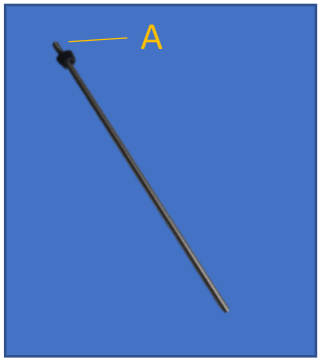


8 MOLLE

N°Pezzi:8

A 1 base magnetica per tavoletta LI

Esempi applicativi: 1 - 2

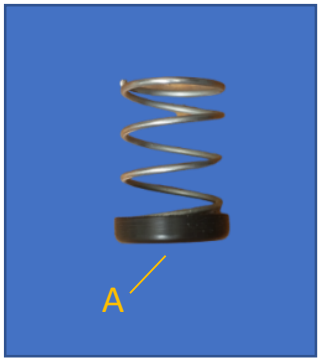


9 CERNIERA BASSA

N°Pezzi:1

A 3 magneti per tavoletta LI

B Bussola per avvitare la lancetta (10)

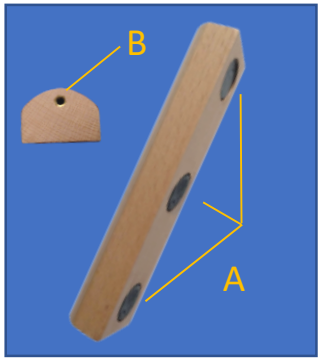


10 CERNIERA ALTA

N°Pezzi:1

A 3 magneti per tavoletta LI

B Bussola per avvitare la lancetta (10)

Esempi applicativi: 1 - 2

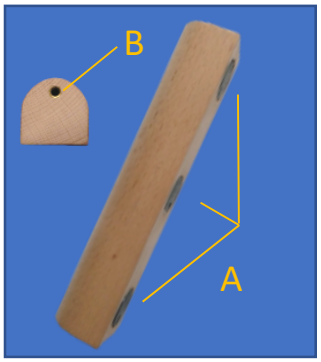

1 RICONOSCIMENTO RESISTENZE IN SPOSTAMENTO DI CARICO

Al Pz seduto su una tavoletta oscillante si modifica il numero di molle poste ai lati (in questo caso a sx), condizionando così la distribuzione del carico.



2 SPOSTAMENTO DI CARICO SULL' AVAMPIEDE

Per riconoscere il numero di molle posizionate e variate dal terapista sotto la parte anteriore della tavoletta, è "obbligato" a portare il carico sull'avampiede dell'arto anteriore. Oltre al valore propriocettivo dell'esercizio, si prepara il paziente alla fase di push off.

