
SCHEDE TECNICHE


Leonardo PF POSITIONAL FEEDBACK




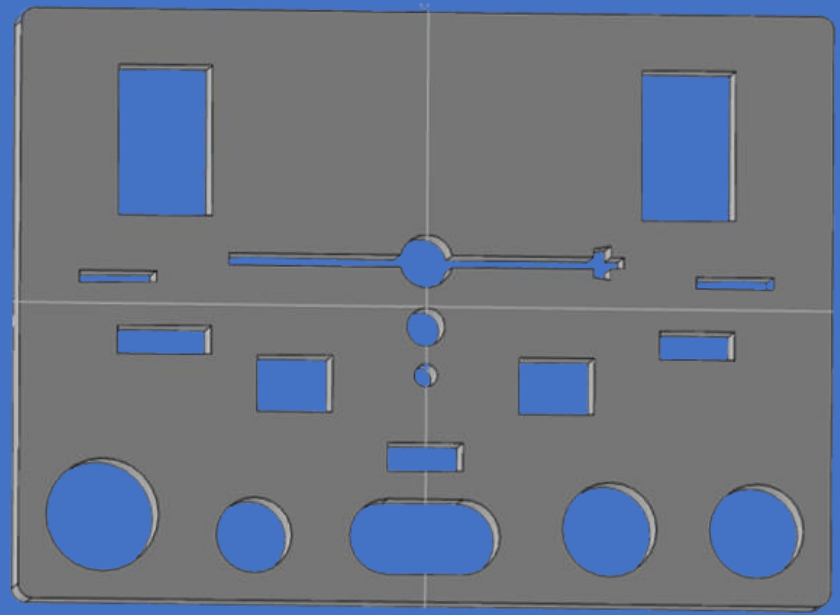

SCHEDE TECNICHE


Leonardo PF POSITIONAL FEEDBACK

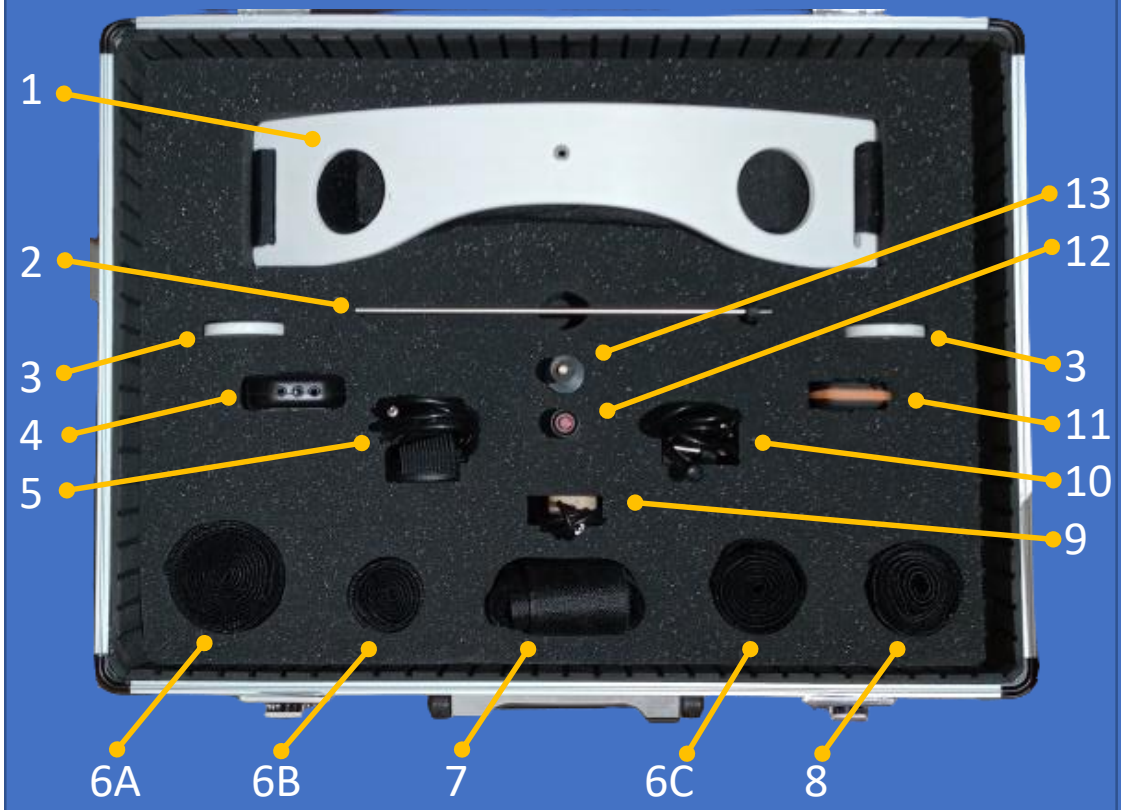

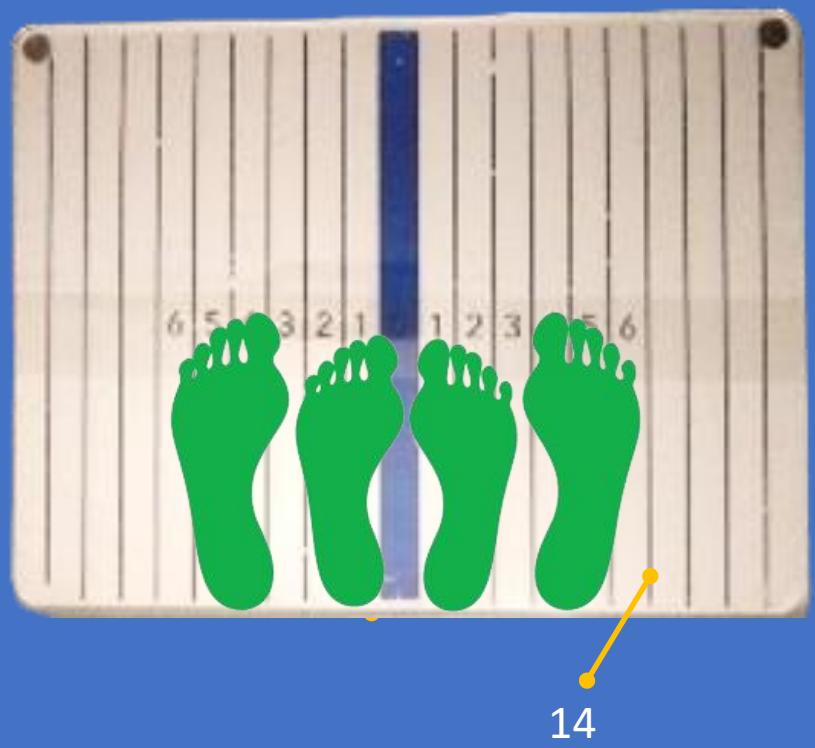

SCHEDE TECNICHE

Leonardo PF POSITIONAL FEEDBACK

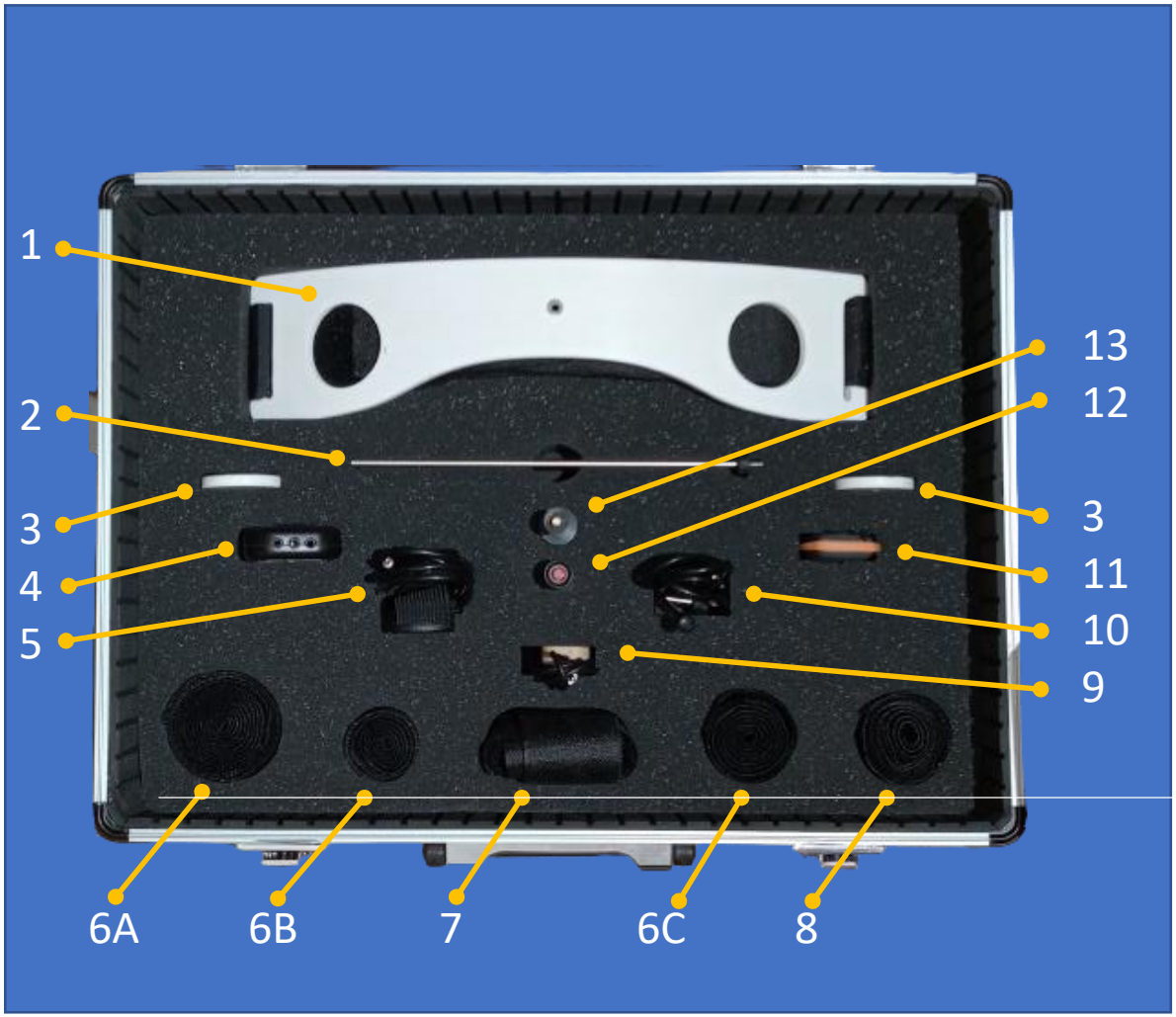

	Componenti
1	VISUALIZZATORE PELVICO
2	ANTENNA
3	SUPPORTO
4	CENTRALINA FEEDBACK
5	GONIOMETRO
6A	FASCE CON VELCRO cm 110
6B	FASCE CON VELCRO cm 40
7	FASCE CON VELCRO PER TRONCO
6C	FASCE CON VELCRO cm 60
8	FASCIA CON VELCRO PER CAVIGLIE
9	PASTIGLIA VIBRANTE
10	INCLINOMETRO
11	GONIOMETRO A FILO
12	LASER
13	PORTA LASER
14	PANNELLO GRAFICA


Leonardo PF POSITIONAL FEEDBACK

SCHEDA TECNICA PAG 1

1 VISUALIZZATORE PELVICO

N°Pezzi:1

- A — 2 bussole per avvitare porta laser (13), antenna (2), inclinometro (10)

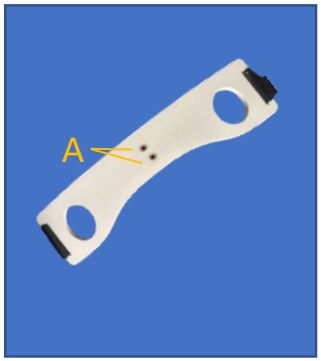


Esempi applicativi: 1

2 ANTENNA

N°Pezzi:1

- A — terminale filettato da inserire al visualizzatore pelvico (1) o al supporto (3)

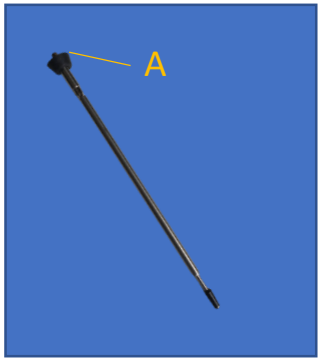


Esempi applicativi: 1

3 SUPPORTO

N°Pezzi:1

- A — bussola filettata per inserimento porta laser (13) , inclinometro (10), antenna (2)

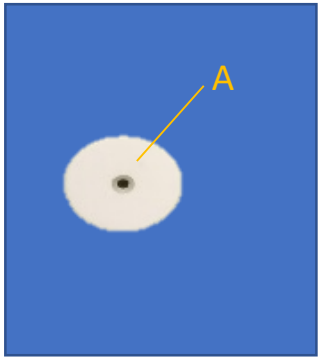


Esempi applicativi: 2

4 CENTRALINA FEEDBACK

N°Pezzi:1

- A — Ingresso per Feedback acustico
- B — Ingresso per pastiglia vibrante
- C — Ingresso per Feedback visivo / vibratorio
- D — Led Feedback
- E — Led batteria carica
- F — Led batteria scarica
- G — Spinotto ricarica

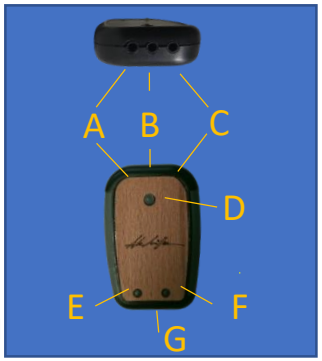


Esempi applicativi: 2 - 3

5 GONIOMETRO

N°Pezzi:1

- A — spinotto per inserimento alla centralina (4)
- B — regolatore elastico
- C — base in velcro per aggancio alle fasce con velcro
- D — regolatore cavetto

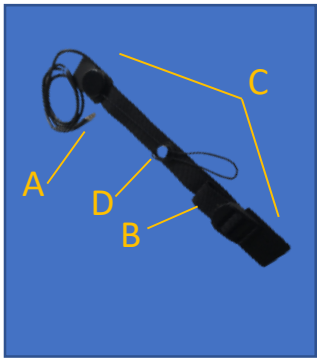


Esempi applicativi: 3

6 FASCE CON VELCRO

N°Pezzi:3

- A — 1 fascia lunghezza 40 cm
- B — 1 fascia lunghezza 60 cm
- C — 1 fascia lunghezza 110 cm

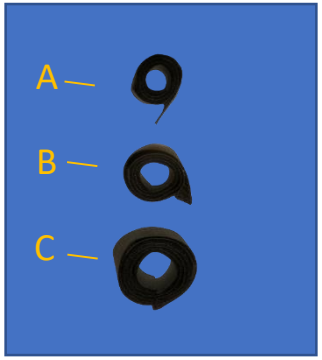


Esempi applicativi:2 - 3

7 FASCIA CON VELCRO PER TRONCO

N°Pezzi:1

- A velcro da agganciare alla fascia 6C anteriormente
- B velcro da agganciare alla fascia 6C posteriormente


Esempi applicativi: 2

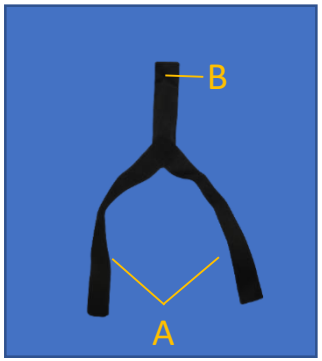

8 FASCIA CON VELCRO PER CAVIGLIE

N°Pezzi:2


- A elemento libero per collegamento goniometro (5)

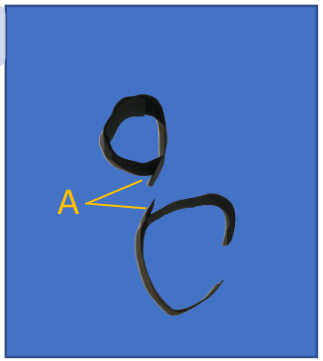

9 PASTIGLIA VIBRANTE

N°Pezzi:1

- A spinotto per inserimento alla centralina (4)
- B elemento vibrante

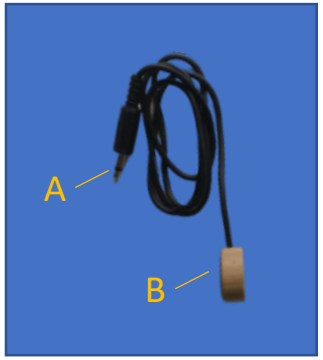


10 INCLINOMETRO

N°Pezzi:1

- A spinotto per inserimento alla centralina (4)
- B terminale filettato da inserire al visualizzatore pelvico (1) o al supporto (3)


Esempi applicativi: 2

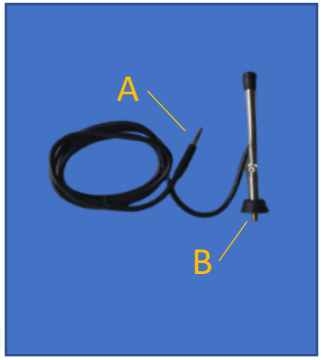

11 GONIOMETRO A FILO

N°Pezzi:1


- A pulsante per regolare la lunghezza del filo
- B anello per inserimento girocollo C elemento elastico D
- C girocollo
- D elemento elastico

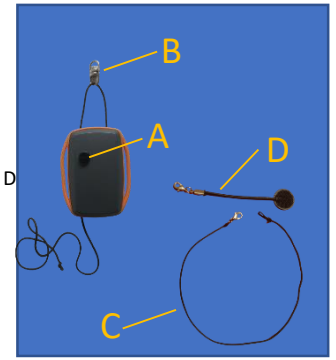

12 LASER

N°Pezzi:1


- A Interruttore

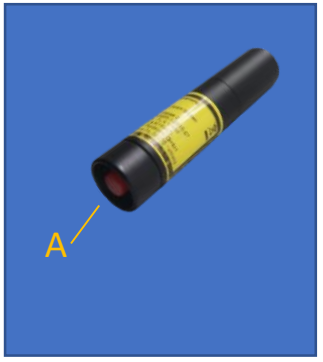

13 PORTA LASER

N°Pezzi:1


- A spazio per inserimento del laser (12)
- B guaina in gomma per stabilizzare il laser (29)
- C terminale filettato da inserire nelle bussole

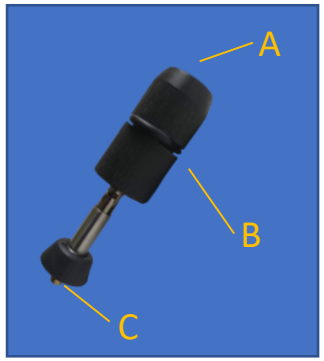

14 PANNELLO GRAFICA

N°Pezzi:1

- A 2 calamite per stabilizzare il pannello trasparente dopo aver inserito gli elementi grafici

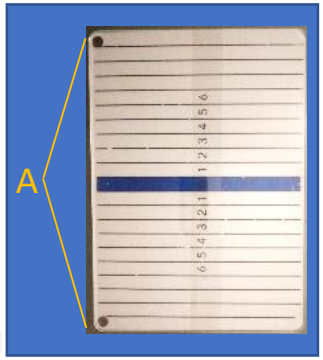

Esempi applicativi: 1

Leonardo PF POSITIONAL FEEDBACK

ESEMPI APPLICATIVI

1 INSEGUIMENTO TRAIETTORIE AL BACINO

Richiesta di spostamento del carico a partenza dal bacino. Il paziente è facilitato nel compito dalla guida visiva creata dal terapista grazie ad una serie di elementi grafici sovrapponibili. Lavoro fondamentale per la riorganizzazione dello schema motorio nel sistema funzionale del cammino.



2 CONTROLLO DEL TRONCO SUL PIANO FRONTALE

L'inclinometro al tronco viene regolato modificando l'inclinazione dell'antennina. In questo esempio una inclinazione verso destra determina la chiusura del circuito al superamento dell'orizzontalità dell'antennina con attivazione del FB. Utile per il controllo di compensi o in compiti associati in cui è richiesta la stabilizzazione del tronco.



3 ATTIVAZIONE DEL FB GONIOMETRICO AL GINOCCHIO

L'attenzione del paziente è riposta al controllo del ginocchio che deve raggiungere un predefinito grado di flessione.

